



Analyseur d'humidité avec écran graphique et 10 emplacements de mémoire pour les processus de dessiccation

Caractéristiques

- Écran graphique rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
 - 1 Programme de dessiccation
 - 2 Temps de dessiccation écoulé
 - 3 Température actuelle
 - 4 Unité de l'affichage des résultats
 - 5 Teneur actuelle en humidité en %
 - 6 Profil de chauffage actif

- **Lampe halogène en verre quartz** 400 W
- **Fenêtre de visualisation sur l'échantillon**, très utile pour le premier réglage
- **Mémoire interne** pour le déroulement automatique de 10 processus complets de dessiccation et 100 processus de dessiccation effectués
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure

- **Marquage des échantillons** pour 99 échantillons au maximum, 2 caractères, librement programmable, est imprimé dans le protocole de mesure
- **Affichage de la date et de l'heure** en série
- **10 coupelles pour échantillons incluses**
- **Manuel pratique** : Pour chaque analyseur d'humidité vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils


EN SÉRIE



OPTION



Modèle	DBS 60-3
Lecture [d]	0,001 g/0,01 %
Portée [Max]	60 g
Reproductibilité pour une pesée 2 g	0,15 %
Reproductibilité pour une pesée 10 g	0,02 %
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)	
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	0-100 %
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100-0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%	0-999 %
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]
Plage de température	50 °C - 200 °C par intervalles de 1 °C
Profils de chauffage	□ Dessiccation standard ▒ Dessiccation par étapes ▓ Dessiccation douce ■ Séchage rapide
Critères de coupure	• Coupure libre automatique (Perte de poids sélectionnable 0,01%-0,1% à 30 s) • Coupure programmée (1 min - 12 h) • Coupure manuelle par bouton
Interrogation de la valeur mesurée/Édition de protocole	Après le séchage, manuellement ou automatiquement (uniquement en liaison avec l'imprimante KERN YKB-01N ou ordinateur)
Dimensions totales L×P×H	202×336×157 mm
Poids net	env. 4,2 kg
Option Cert. d'étalonnage DAKKS	963-127

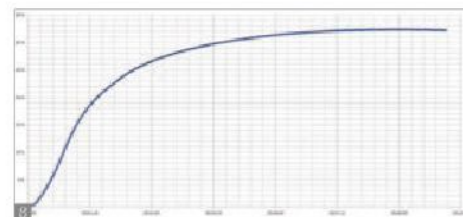

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, en série, commande ultérieure possible, lot de 5, DBS-A03S05
- **Coupelles pour échantillons en aluminium**, Ø 90 mm. Emballage de 80 pièces, MLB-A01A
- **Filtre rond en fibres de verre** pour les échantillons qui gicent et font des miettes. Emballage de 100 pièces, RH-A02
- **Jeu d'étalonnage de la température** constitué d'un capteur et d'un afficheur, DBS-A01.
- **Set pour interface USB** pour échange de données bidirectionnel entre balance/ analyseur d'humidité et ordinateur. Livraison : câble USB, driver, logiciel balance connection, DBS-A02
- **Visualisation du processus de la dessiccation** avec Balance Connection, SCD-4.0